

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP “VANTAGE”



DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG
FØLGES

 **Keeler**

INDHOLD

1. Symboler
2. Advarsler
3. Miljøhensyn
4. Beskrivelse af produktet
5. Isætning og udskiftning af batteri
6. Montering på væg
7. Opladning
8. Ladecyklus
9. Garanti og service
10. Tekniske data
11. Rengøring
12. Kontaktoplysninger

1.0 Symboler



Bemærk! Læs advarslerne og brugsanvisningen i driftsvejledningen.



CE-mærket på produktet angiver at det er afprøvet i henhold til og overholder bestemmelserne i direktiv 93/42/EØF for medicinsk udstyr.

2.0 Advarsler

Inden dette Keeler-produkt tages i brug, bør denne sektion omhyggeligt gennemlæses. Af hensyn til Deres egen og Deres kunders sikkerhed skal alle nedenstående sikkerhedsregler iagttages. Oplysningerne i det følgende har til formål at gøre opmærksom på de potentielle risici der kan være forbundet med forkert brug og beskadigelse af udstyret.



Advarsel

Dette produkt må ikke anvendes hvor der er brændbare luftarter til stede.

Undlad at skille batteriet ad eller foretage ændringer af det. Det indeholder ingen dele der kan serviceres af brugeren.

Undlad at brænde, gennemhulle eller kortslutte batteriet.

Undlad at bruge et batteri der er deformeret, utæt, korroderet eller har synlige skader. Et beskadiget eller lækkende batteri skal håndteres med største forsigtighed. Hvis man kommer i kontakt med elektrolyt, skal det angrebne område afvaskes med sæbe og vand. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med et øje, skal der straks søges lægehjælp.

Hvis produktet afgiver unormal lugt, varme eller røg, bør man straks ophøre med at bruge det. Fortsat brug af et beskadiget produkt eller komponent kan give anledning til kvæstelser.

Undlad at nedsænke produktet i væske.

Undlad at bruge produktet hvis det er beskadiget, og undersøg det med mellemrum for synlige tegn på skader.

Undlad at tilslutte produktet til en beskadiget netkontakt.

Hvis tilslutningen er dårlig, kan kontaktbenene blive varme. Pas på ved afbrydelse.

Undgå at have løsthængende ledninger hvor man kan risikere at falde over dem.

I USA er det et lovkrav at produktet kun kan sælges af eller efter forskrift af en læge.



Forsigtig

Brug udelukkende Keeler-batteri nr. 1919-P-1013

Opladning må kun foretages med et Keeler ladeapparat, del nr. 1941-P-5334

Undgå at oplade batteriet på et sted hvor temperaturen kan komme op over 40°C eller under 0°C.

Skal holdes uden for børns rækkevidde

Kun til indendørs brug (skal beskyttes mod fugtighed)

For at forhindre kondensdannelse skal instrumentet bringes op til stuetemperatur inden brug.

Ved udskiftning af lithiumbatteriet skal der slukkes for instrumentet, inden den nye batterienhed monteres.

Elektrisk udstyr kan påvirkes af elektromagnetisk interferens. Hvis dette skulle ske under brug af instrumentet, skal der først slukkes for det, hvorefter det flyttes.


3.0 Miljøhensyn

Batteriet skal bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser om genbrug af batterier.

Sæt tape på batteriets kontakter for at undgå kortslutning under bortskaffelse.


Li-ion-batterier indeholder ingen toksiske metaller, som f.eks. kviksølv, kadmium eller bly.

4.0 Beskrivelse af produktet

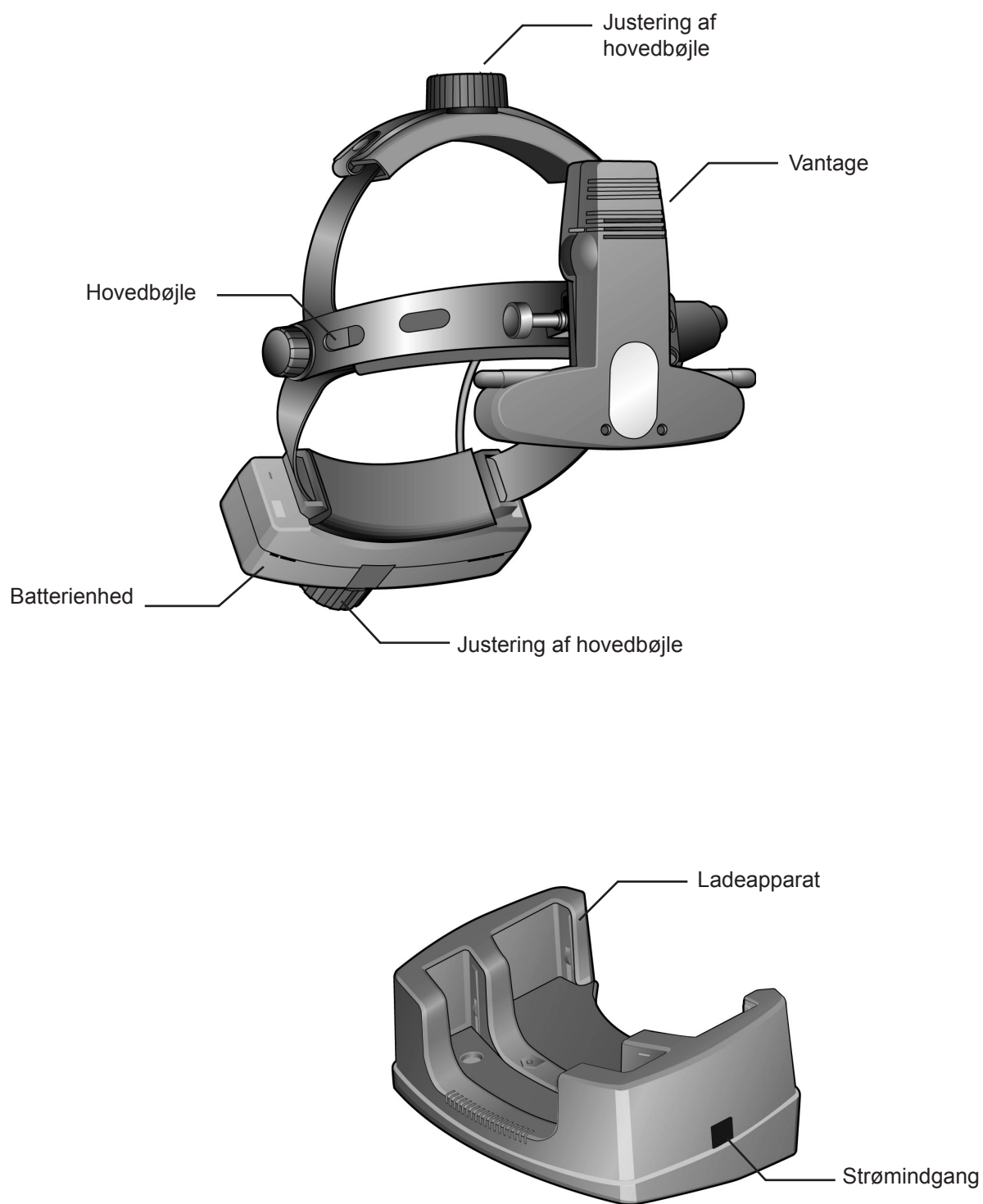


5.0 Isætning og udskiftning af batteri

Udløs batteriet ved at trykke på udløserkontakten, som vist, og løft batteriet ud af holderen.

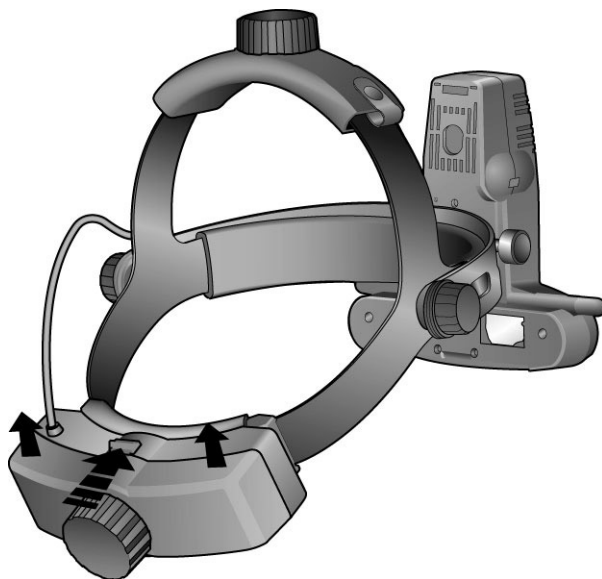


Det nye batteri isættes ved at anbringe det i holderen, indtil det er forsvarligt tilsluttet.

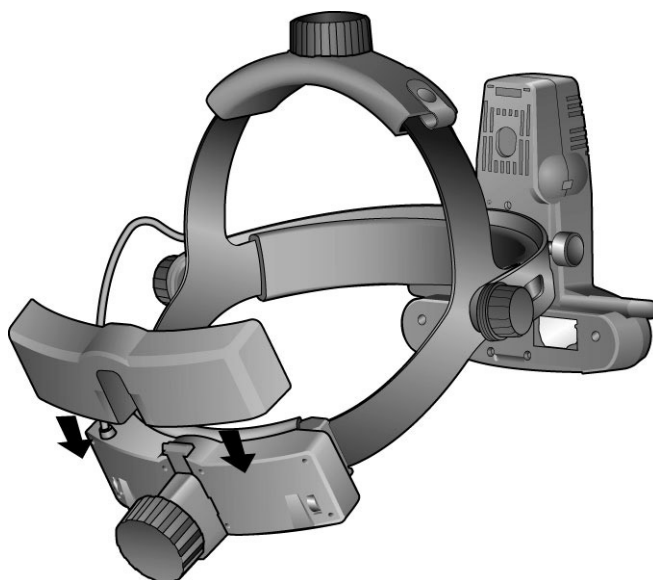


6.0 Montering på væg


6.1

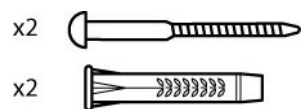



6.2

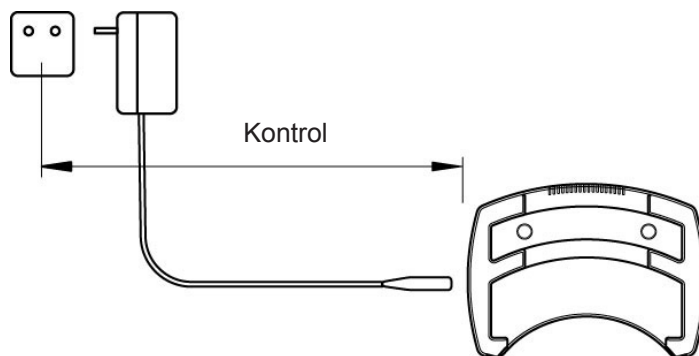


6.3

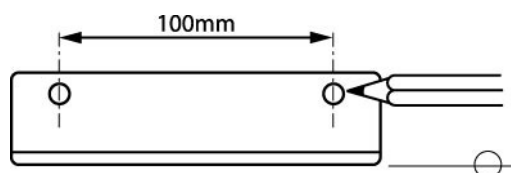


6.4 **FORSIGTIG**

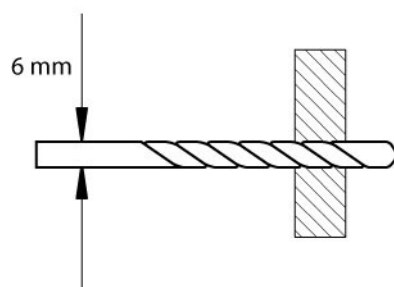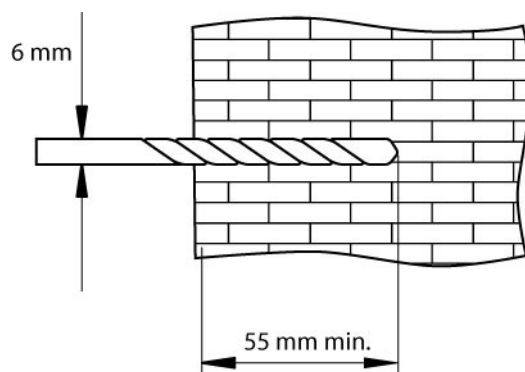

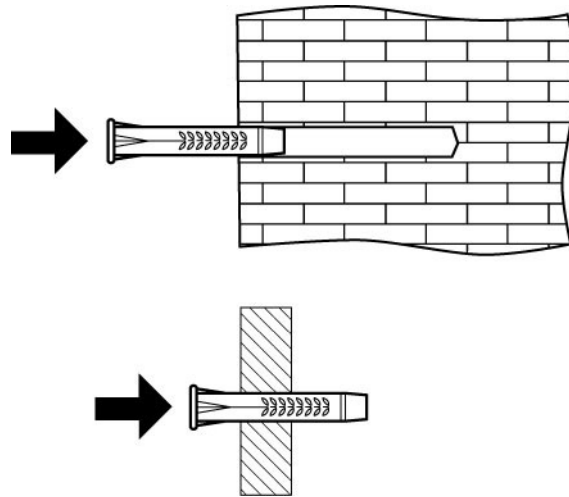


7.0 Opladning

Udskift blindpladen med den rette netstikadapter, og slut stikket på kablet til strømindgangen på ladeapparatet.

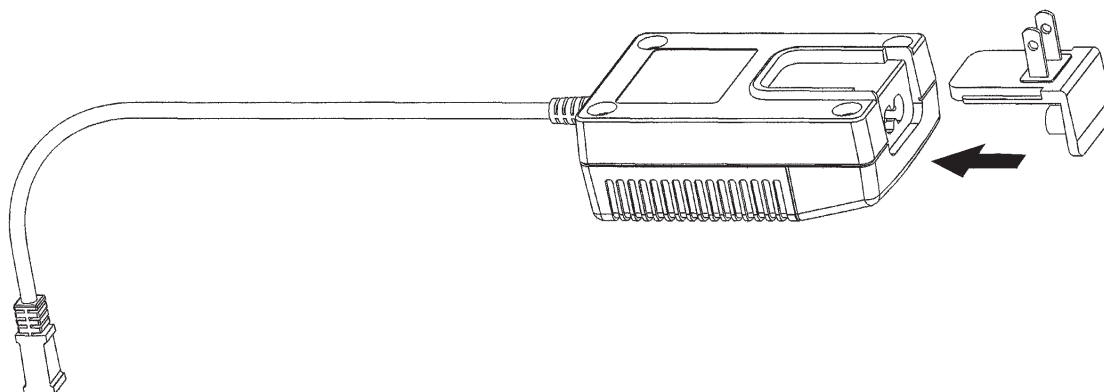

Tænd for ladeapparatet ved at slutte den til en netkontakt. Anbring reservebatteriet eller hovedtelefonen i ladeapparatet som vist på illustrationen.

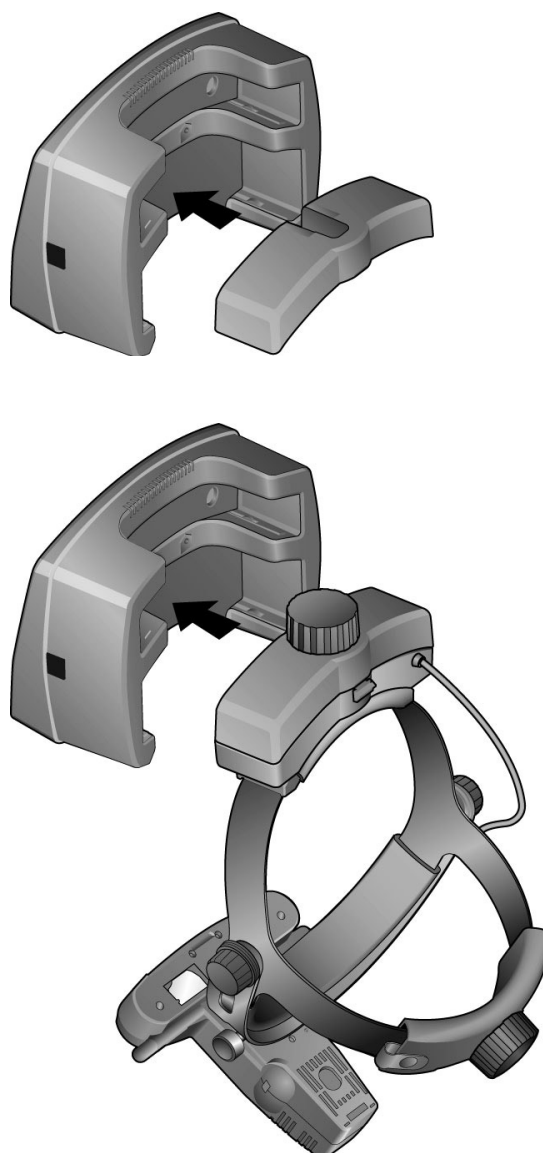

Lithiumbatteri

Blinkende LED – batteriet trænger til at oplades.

Ladeapparat


Slukket LED – batteriet er fuldt opladet.

Blinkende LED – opfyldningsladning.

Konstant LED – hurtigladning.


Batteriet kan bruges når som helst i ladecykklussen og vil automatisk genoptage opladningen når det anbringes i ladeapparatet igen.

Retningspilen på ladeapparatet viser hvilket batteri der oplades.

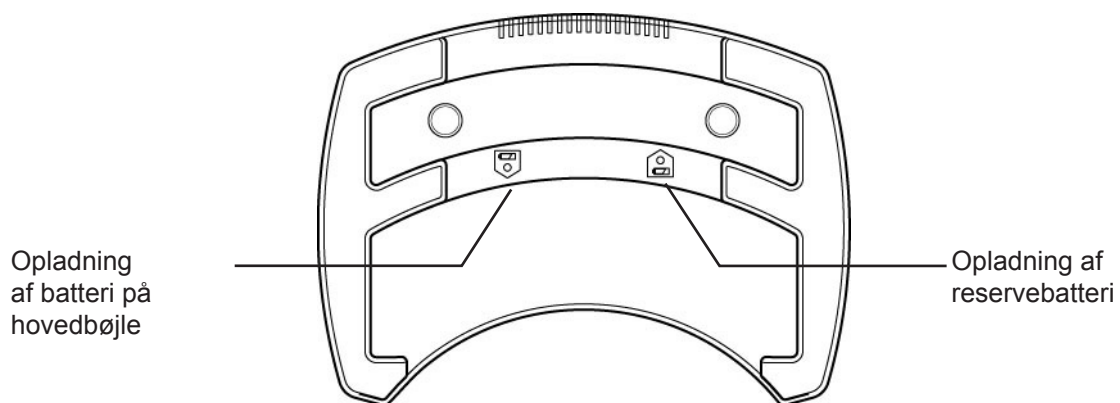

8.0 Ladecyklus

Fuld opladning af batteriet i instrumentet tager ca. 2 timer.

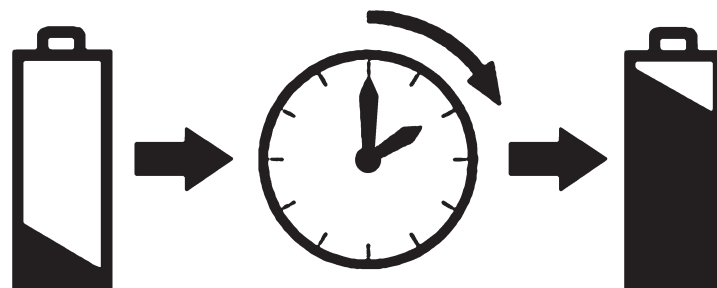

Batteriet fungerer i ca. 1 time på fuld kraft.

Det tager 4 timer at oplade reservebatteriet, 1919-P-1013.

9.0 Garanti og service


Indeholder ingen dele der kan serviceres af brugeren. Al forebyggende vedligeholdelse og servicering skal udføres af en autoriseret Keeler-forhandler.

Keeler-ladeapparatet omfattes af 3 års garanti og erstattes eller reparerer uden beregning under følgende forudsætninger:-

- 9.1 At den eventuelle defekt skyldes fabrikationsfejl.
- 9.2 At strømforsyningen har været brugt i overensstemmelse med nærværende vejledning.
- 9.3 At skadesanmeldelsen ledsages af kvittering.

Batterier nyder garanti i 1 år fra købsdatoen.

10.0 Tekniske data

Strømforsyning (se mærkepladen):	100-240 V - 50/60 Hz
Mærkeeffekt:	12 V ; 2,5 A
Driftmåde:	Kontinuerlig
Klassifikation:	Udstyr - Klasse II
Sikkerhedsklasse:	Beskyttelse mod elektrisk stød - Type B
Omgivelsestemperatur:	Dobbeltisoleret
Transport:	 fra +10 til +35°C fra -40 til +70°C, relativ fugtighed 10-95%
Standarder:	IEC60601-1 Elektrisk sikkerhed / IEC 60601-1-2 EMC ISO9022-2 Miljøbeskyttelse ISO9022-3 Miljøbeskyttelse

11.0 Rengøring

Instrumentet bør kun rengøres manuelt og uden nedsænkning i væske, som beskrevet nedenfor.

- 11.1 Tør overfladen med en ren, absorberende, ikke-fnuggende klud fugtet med en opløsning af vand og sæbe (2 volumenprocent) eller vand og isopropylalkohol (70 volumenprocent).
- 11.2 Pas på at opløsningen ikke trænger ind i instrumentet. Kluden må ikke mættes med opløsning.
- 11.3 Overfladen håndtørres med en ren, ikke-fnuggende klud.
- 11.4 Brugte rengøringsmaterialer skal bortskaffes på forsvarlig måde.

12.0 Kontaktoplysninger

FREMSTILLET I STORBRITANNIEN AF:

Keeler Limited

Clewer Hill Road

Windsor

Berkshire SL4 4AA

England

Tlf.: +44 (0)1753 857177

Fax: +44 (0)1753 827145

FRIKALD: +44 (0)800 521 251

DISTRIBUTION:

Keeler Instruments Inc

456 Parkway

Broomall

PA 19008, USA

Frikald: +1 800 523 5620

Tlf.: +1 610 353 4350

Fax: +1 610 353 7814

Som led i vores politik om konstant produktforbedring forbeholder vi os ret til ændringer af specifikationer uden varsel.

EP59-11189 Udgave A